




## CAMA DE LUGAR SEGURO INSTRUCCIONES



**ANTES DEL PRIMER USO: USE UN PAÑO HÚMEDO PARA LIMPIAR SUAVEMENTE LAS PARTES TRANSPARENTES, NEGRAS Y BLANCAS DE CADA VÁLVULA.**

### PASO 1

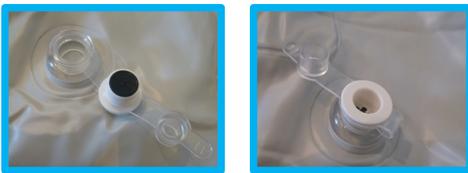

Infle y desinfe la cama Safe Place con las cremalleras cerradas y bloqueadas. Coloque la cama Safe Place sobre una cama fija de al menos 190 cm de largo y 135 cm de ancho.

Inserte la válvula blanca en el orificio de plástico transparente. Asegúrese de que esté completamente insertado. Repita para las cuatro válvulas.

### PASO 2



Infle las cuatro secciones de la cama Safe Place. Cada parte inflable de la cama debe ser firme, pero no dura.

Tenga cuidado de no inflar demasiado la cama, ¡esto anulará la garantía!

### PASO 3



Empuje el tapón transparente hasta el fondo de la válvula blanca, luego deslice toda la válvula en la cama de lugar seguro. Repita para las cuatro válvulas.

### PASO 4



Compruebe que la cama de lugar seguro esté en el centro de la cama fija. Conecte una correa blanca a un clip blanco. Pase la correa por debajo de la cama fija y conecte el clip blanco en el otro lado de la cama Safe Place.

Repita en el extremo opuesto de la cama de lugar seguro. Apriete las correas blancas hasta que la cama Safe Place no pueda moverse ni volcarse.

## CIERRE DE CREMALLERA



Cierre las cremalleras en el extremo de la cama con el clip de cremallera. Coloque el clip en ambas cremalleras y tire de la correa con fuerza para que las cremalleras no se puedan mover.

## INSPECCIÓN DIARIA DE LA CAMA SAFE PLACE ANTES DE SU USO

1. Inspeccione la cama de lugar seguro todos los días antes de colocar al niño en ella:
2. Realice una inspección visual para verificar que la cama de lugar seguro esté en el medio de la cama estacionaria y que la malla esté intacta.
3. Realice una inspección manual:
  - i. Aprieta cada parte de la cama para asegurarte de que aún esté inflada. Si una sección se ha vaciado de aire, limpie las tres secciones de la válvula y vuelva a inflarla. No use la cama durante 24 horas para asegurarse de que la sección retenga aire. Si la sección se desinfla de nuevo, póngase en contacto con [safeplacedeu@gmail.com](mailto:safeplacedeu@gmail.com)
  - ii. Tire de cada correa blanca con la mano para asegurarse de que esté bien ajustada y que la cama Safe Place permanezca en el medio de la cama estacionaria.
  - iii. Tire de la cremallera cuando cierre la cama Safe Place.
4. Si ve un problema, no use la cama y comuníquese con [safeplacedeu@gmail.com](mailto:safeplacedeu@gmail.com)

## MANTENTE SEGURO MIENTRAS USAS TU PLACE BED SEGURO

1. Inspeccione la caja fuerte en busca de daños cada vez que la use.
2. Hable con su médico antes de usar una cama Safe Place si su hijo tiene menos de 36 meses de edad o tiene un tono muscular bajo. Riesgo de asfixia.
3. Vigile de cerca al niño/usuario cuando acceda al exterior de la cama Safe Place. El riesgo puede incluir, entre otros, asfixia por correas, asfixia en la cremallera.
4. No fumar ni fuentes de calor cerca de Safe Place Bed
5. Mantenga la cama Safe Place alejada del agua, no es un dispositivo de flotación.
6. Mantenga los objetos afilados alejados de la cama Safe Place, los pinchazos no están cubiertos por la garantía y pueden dañar al niño.
7. Este producto no es un juguete.
8. Siempre consulte a su médico antes de usar este producto

## Contáctenos:

[www.safeplacedeu.com](http://www.safeplacedeu.com)

[safeplacedeu@gmail.com](mailto:safeplacedeu@gmail.com)

+447782105085