




VEILIG BED PLAATSEN AANWIJZINGEN



VOOR HET EERSTE GEBRUIK: GEBRUIK ADAMP DOEK OM VOORZICHTIG DE HELDERE, ZWARTE EN WITTE DELEN VAN ELKE KLEP AF TE VEGEN.

STAP 1

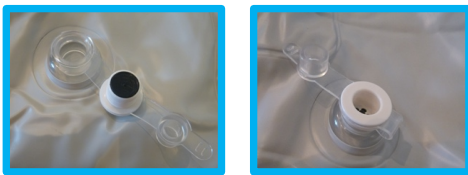

Blaas het Safe Place-bed op en laat het leeglopen met gesloten en vergrendelde ritsen.

Plaats het Safe Place Bed op een stationair bed van minimaal 190 cm lang en 135 cm breed.

Steek het witte ventiel in het doorzichtige plastic gat. Zorg ervoor dat het volledig is geplaatst. Herhaal dit voor alle vier de kleppen.

STAP 2



Blaas alle vier de delen van het Safe Place-bed op. Elk opblaasbaar deel van het bed moet stevig zijn, maar niet hard.

Pas op dat u het bed niet te veel opblaast, hierdoor vervalt de garantie!

STAP 3



Duw de doorzichtige plug helemaal in het witte ventiel en schuif vervolgens het hele ventiel in het Safe Place Bed.

Herhaal dit voor alle vier de kleppen

STAP 4



Controleer of het Safe Place-bed zich in het midden van het stationaire bed bevindt. Verbind een witte band met een witte clip. Leid de riem onder het stationaire bed en sluit de witte clip aan de andere kant van het Safe Place Bed aan. Herhaal dit aan het andere uiteinde van het Safe Place Bed. Trek de witte banden aan totdat het Safe Place Bed niet kan verschuiven of kantelen.

RITS VERGRENDING



Sluit de ritsen aan het einde van het bed met de ritsclip. Bevestig de clip aan beide ritsen en trek de riem strak zodat de ritsen niet kunnen worden verplaatst.

DAGELIJKSE INSPECTIE VAN HET SAFE PLACE BED VOOR GEBRUIK

1. Inspecteer het Safe Place-bed elke dag voordat u het kind erin legt:
2. Voer een visuele inspectie uit om te controleren of het Safe Place Bed zich in het midden van het stationaire bed bevindt en of het gaas intact is.
3. Voer een handmatige inspectie uit:
 - i. Knijp in elk deel van het bed om ervoor te zorgen dat het nog steeds opgeblazen is. Als er lucht is geleegd in een sectie, reinigt u alle drie de secties van het ventiel en blaast u deze opnieuw op. Gebruik het bed gedurende 24 uur niet om ervoor te zorgen dat het gedeelte lucht vasthoudt. Als het gedeelte weer leegloopt, neem dan contact met safeplacebedseu@gmail.com
 - ii. Trek met de hand aan elke witte riem om ervoor te zorgen dat deze strak zit en dat het Safe Place-bed in het midden van het stationaire bed blijft.
 - iii. Trek aan de rits bij het sluiten van het Safe Place Bed.
4. Als u een probleem ziet, gebruik het bed dan niet en neem contact met safeplacebedseu@gmail.com

BLIJF VEILIG TIJDENS HET GEBRUIK VAN UW VEILIGE PLACE BED

1. Inspecteer de kluis elke keer dat u hem gebruikt op schade.
2. Neem contact op met uw arts voordat u een Safe Place-bed gebruikt als uw kind jonger is dan 36 maanden of een lage spierspanning heeft. Verstikkingsgevaar.
3. Houd het kind/de gebruiker nauwlettend in de gaten bij het betreden van de buitenkant van het Safe Place-bed. Het risico kan omvatten, maar is niet beperkt tot, verstikking door riemen, verstikking van de rits.
4. Niet roken of warmtebronnen in de buurt van Safe Place Bed
5. Houd het Safe Place Bed uit de buurt van water, het is geen drijfmiddel.
6. Houd scherpe voorwerpen uit de buurt van het Safe Place-bed, lekke banden vallen niet onder de garantie en kunnen schadelijk zijn voor het kind.
7. Dit product is geen speelgoed.
8. Raadpleeg altijd uw arts voordat u dit product gebruikt

Neem contact met ons op:

www.safeplacebedseu.com

safeplacebedseu@gmail.com

+447782105085