




BEZPEČNÉ MÍSTO POSTELE INSTRUKCE



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM: POMOCÍ REKLAMOUAMP HADŘÍKEM JEMNĚ OTŘETE ČIRÉ, ČERNÉ A BÍLÉ ČÁSTI KAŽDÉHO VENTILU.

KROK 1

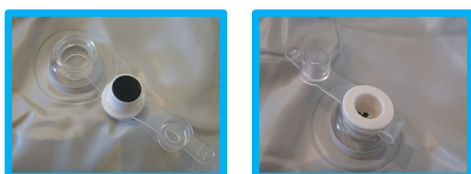

Nafukujte a vyfukujte postel Safe Place Bed se zapnutými a uzamčenými zipy. Umístěte postel Safe Place na stacionární lůžko, které je alespoň 190 cm dlouhé a 135 cm široké.

Vložte bílý ventil do průhledného plastového otvoru. Ujistěte se, že je zcela zasunutý. Opakujte pro všechny čtyři ventily.

KROK 2



Nafoukněte všechny čtyři části postele Safe Place Bed. Každá nafukovací část postele by měla být pevná, ale ne tvrdá. Dávejte pozor, abyste postel příliš nenafoukli, tím zaniká záruka!


KROK 3



Zatlačte průhlednou zátku až na doraz do bílého ventilu a poté zasuňte celý ventil do postele Safe Place Bed.

Opakujte pro všechny čtyři ventily

KROK 4

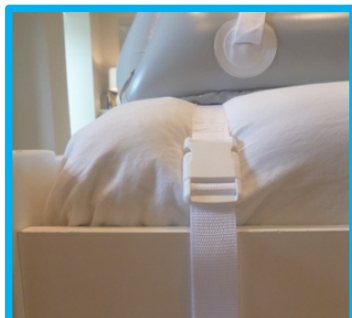

Zkontrolujte, zda je bezpečné lůžko uprostřed stacionárního lůžka. Připojte bílý pásek k bílé sponě. Protáhněte popruh pod stacionární postel a připojte bílou sponu na druhé straně postele Safe Place Bed.

Opakujte na opačném konci postele Safe Place Bed. Utáhněte bílé popruhy, dokud

se postel Safe Place Bed nebude moci pohnout nebo převrátit.

ZÁMEK ZIPU



Zipy na konci postele uzavřete sponou na zip. Připevněte sponu k oběma zipům a pevně zatáhněte za popruh, aby se zipy nemohly pohybovat.

DENNÍ KONTROLA POSTELE SAFE PLACE BED PŘED POUŽITÍM

1. Postýlku Safe Place Bed před uložením dítěte do ní každý den kontrolujte:
2. Proveďte vizuální kontrolu, abyste zkontrolovali, zda je postel Safe Place Bed uprostřed stacionárního lůžka a zda je síť neporušená.
3. Proveďte ruční kontrolu:
 - i. Stiskněte každou část postele, abyste se ujistili, že je stále nafouknutá. Pokud se z části vyprázdnil vzduch, vyčistěte všechny tři části ventilu a znovu nafoukněte. Nepoužívejte postel po dobu 24 hodin, abyste zajistili, že část zadrží vzduch. Pokud se sekce znovu vyfoukne, kontaktujte safeplacebedseu@gmail.com
 - ii. Zatáhněte za každý bílý popruh rukou, abyste se ujistili, že je utážený a postel Safe Place Bed zůstane uprostřed stacionárního lůžka.
 - iii. Při zavírání postele Safe Place zatáhněte za zip.
4. Pokud narazíte na problém, postel nepoužívejte a kontaktujte safeplacebedseu@gmail.com

ZŮSTAŇTE V BEZPEČÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ SVÉHO TREZORU MÍSTO BED

1. Při každém použití trezor zkontrolujte, zda není poškozený.
2. Před použitím postele Safe Place Bed se poraďte se svým lékařem, pokud je vašemu dítěti méně než 36 měsíců nebo má nízký svalový tonus. Nebezpečí udušení.
3. Při přístupu na vnější stranu postele Safe Place Bed pečlivě sledujte dítě/uživatele. Riziko může zahrnovat, ale není omezeno na, udušení popruhy, udušení na zipu.
4. Zákaz kouření a zdrojů tepla v blízkosti Safe Place Bed
5. Udržujte postel Safe Place mimo dosah vody, nejedná se o plovací zařízení.
6. Udržujte ostré předměty v dostatečné vzdálenosti od postele Safe Place Bed, na propíchnutí se nevztahuje záruka a může poškodit dítě.
7. Tento výrobek není hračka.
8. Před použitím tohoto produktu se vždy poraďte se svým lékařem

Kontaktujte nás:

www.safepacebedseu.com

safepacebedseu@gmail.com

+447782105085