




## TRYGG SENG INSTRUKS



**FØR FØRSTE GANGS BRUK: BRUK EN FUKTIG KLUT TIL Å TØRKE FORSIKTIG AV DE KLARE, SVARTE OG HVITE DELENE AV HVER VENTIL.**

### TRINN 1

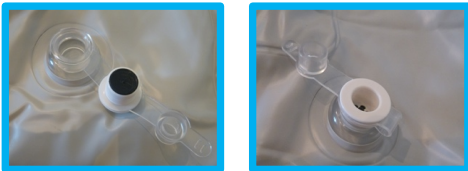

Blås opp og tømme Safe Place Bed med glidelåser lukket og låst.

Plasser Safe Place Bed på en stasjonær seng som er minst 190 cm lang og 135 cm bred.

Sett den hvite ventilen inn i det klare plathullet. Forsikre deg om at den er satt helt inn. Gjenta for alle fire ventiler.

### TRINN 2



Blås opp alle fire delene av Safe Place Bed. Hver oppblåsbar del av sengen skal være fast, men ikke hard.

Vær forsiktig så du ikke blåser opp sengen for mye, dette vil annullere garantien!

### TRINN 3



Skyv den klare pluggen helt inn i den hvite ventilen, og skyv deretter hele ventilen inn i Safe Place-sengen.

Gjenta for alle fire ventiler

### TRINN 4



Kontroller at Safe Place-sengen er midt i den stasjonære sengen. Koble en hvit stropp til en hvit klips. Før stroppen under den stasjonære sengen og koble den hvite klipsen på den andre siden av Safe Place-sengen.

Gjenta i motsatt ende av Safe Place Bed. Stram de hvite stroppene til Safe Place Bed ikke kan bevege seg eller velte.

## LÅS MED GLIDELÅS



Lukk glidelåsene på enden av sengen med glidelåsklemmen. Fest klipsen til begge glidelåsene og trekk stroppen godt slik at glidelåsene ikke kan flyttes.

## DAGLIG INSPEKSJON AV SAFE PLACE BED FØR BRUK

1. Inspiser Safe Place Bed hver dag før du plasserer barnet i den:
2. Utfør en visuell inspeksjon for å kontrollere at Safe Place Bed er midt i den stasjonære sengen og at nettet er intakt.
3. Utfør en manuell inspeksjon:
  - i. Klem hver del av sengen for å sikre at den fortsatt er oppblåst. Hvis en seksjon er tømt for luft, rengjør alle tre delene av ventilen og blås opp igjen. Ikke bruk sengen i 24 timer for å sikre at seksjonen holder luft. Hvis seksjonen tømmes igjen, kontakt [safeplacebedseu@gmail.com](mailto:safeplacebedseu@gmail.com)
  - ii. Trekk hver hvite stropp for hånd for å sikre at den er tett og at Safe Place Bed forblir midt i den stasjonære sengen.
  - iii. Trekk i glidelåsen når du lukker Safe Place-sengen.
4. Hvis du ser et problem, må du ikke bruke sengen, og kontakte [safeplacebedseu@gmail.com](mailto:safeplacebedseu@gmail.com)

## HOLD DEG TRYGG MENS DU BRUKER DIN TRYGGE PLACE BED

1. Inspiser safen for skade hver gang du bruker den.
2. Snakk med legen din før du bruker en trygg seng hvis barnet ditt er under 36 måneder eller har lav muskeltonus. Fare for kvelning.
3. Vennligst overvåk barnet/brukeren nøye når du får tilgang til utsiden av Safe Place Bed. Risikoen kan omfatte, men er ikke begrenset til, kvelning fra stropper, kvelning på glidelåsen.
4. Ingen røyking eller varmekilder i nærheten av Safe Place Bed
5. Hold Safe Place Bed borte fra vann, det er ikke en flyteanordning.
6. Hold skarpe gjenstander borte fra Safe Place Bed, punkteringer dekkes ikke av garantien og kan skade barnet.
7. Dette produktet er ikke leketøy.
8. Rådfør deg alltid med legen din før du bruker dette produktet

## Kontakt oss:

[www.safeplacebedseu.com](http://www.safeplacebedseu.com)

[safeplacebedseu@gmail.com](mailto:safeplacebedseu@gmail.com)

+447782105085