

# INSTRUCTIONS

## Setting Up Your Safe Place Bed



Safe Place  
Bedding LLC



Youtube filmpje:  
Basisopstelling van het Safe Place Bed

1. Elk Safe Place Bed model 100 bestaat uit een canvas hoes met vier springkussens erin, vier riemen en instructies.

2. Plaats het Safe Place Bed op een stilstaand bed van minimaal 135 cm breed en klap het uit. Zorg ervoor dat het gaas op de deur die zich het dichtst bij u bevindt, volledig zichtbaar is.




3. Trek een ritslipje uit de canvas zak en open de ritssluiting totdat deze zich 2-3 cm boven het ventiel op het springkussen bevindt (open de ritssluiting niet volledig, anders zal het moeilijk zijn om te sluiten na het opblazen) Zorg ervoor dat het zwarte ventiel volledig in de doorzichtige opening is gestoken zonder opening.



4. Herhaal dit voor alle vier de zijden van het Safe Place-bed

5. Blaas alle vier de zijden van het Safe Place-bed op: Mogelijk moet u de luchtpomp in het zwarte ventiel houden. Het Safe Place-bed moet rechtop staan.

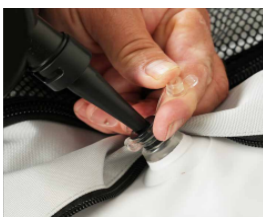

6. Om het springkussen af te dichten, steekt u de doorzichtige plug in de zwarte eenrichtingsklep en drukt u de klep vervolgens in de opblaasbare kamer. Herhaal dit voor alle vier de kleppen. Rits alle vier de kamers dicht, duw het ritslipje terug in de canvas zak.



7. Plaats het Safe Place-bed in het midden van het stationaire bed. Er moet minimaal 10 cm ruimte zijn tussen de lange randen van het Safe Place-bed en de rand van de matras. Raadpleeg de afbeelding voor hulp. Een bedbeschermer over de volledige lengte moet worden gebruikt als het stilstaande bed minder dan 135 cm breed is.



8. Sluit twee riemen aan op de lange zijde van het Safe Place Bed. Leid de riemen onder het stationaire bed door en bevestig ze aan de andere kant van het Safe Place Bed. Span de banden aan – zie stap 9 voor details.

Sluit twee riemen aan op de korte zijde van het Safe Place Bed. Leid de riemen onder het stationaire bed door en bevestig ze aan de andere kant van het Safe Place Bed. Span de riemen aan. De riemen moeten een "hashtag #" vormen onder het stilstaande bed.



YouTube video: het bed opklappen

9. Verwijder de speling van elk van de vier riemen totdat het Safe Place-bed stevig aan het stilstaande bed is bevestigd. Trek de riem in het midden van de gesp omhoog en verwijder de speling boven de gesp. Om de omsnoeringsband op zijn plaats te vergrendelen, trekt u aan de staart van de omsnoeringsband

\*Houd er rekening mee dat er twee gespen op elke band zitten.

Het niet aanspannen van de riemen kan ernstig letsel tot gevolg hebben. Inspecteer bij elk gebruik de riemen en gespen op beschadigingen.



#### Ritssluiting:

Sluit de sluiting aan op het lipje met ritssluiting en trek de stoffen band aan totdat er geen opening meer is tussen het lipje van de rits en de doek.

Zorg er bij het opblazen en leeglaten van het bed voor dat de deuren gesloten en vergrendeld zijn.



#### Dagelijkse controles tijdens het gebruik van het Safe Place Bed

- Controleer voordat u het Safe Place Bed gebruikt op onvolkomenheden in het gaas.
- Knijp in alle vier de springkussens om ervoor te zorgen dat ze nog steeds opgeblazen zijn. Als een kamer is leeggelopen, verwijder dan de doorzichtige plug en de zwarte eenrichtingsklep uit de doorzichtige plastic opening, reinig, droog, vervang en blaas opnieuw op. Gebruik het bed 24 uur niet om ervoor te zorgen dat opblaasbaar lucht vasthoudt. Als het weer leegloopt, neem dan contact op met de klantenservice.
- Trek aan alle vier de riemen om er zeker van te zijn dat elke riem strak zit en controleer of het Safe Place-bed zich in het midden van het stilstaande bed bevindt.
- Controleer of de ritssluiting goed werkt als u de deur sluit.
- Controleer de ritssluiting en draai deze indien nodig vast.
- Als er problemen zijn met een van de bovenstaande, gebruik dan het Safe Place Bed niet en neem contact op met de klantenservice.

#### Reiniging:

- Bed schoonmaken met warm water. Gebruik geen wasmiddel, omdat dit de waterdichte coating op de stof verwijderd.

#### Een opblaasbare kamer vervangen:



YouTube filmpje:  
Veranderen van de kamers


#### Eindkamer (driehoek) wijzigen

- Open beide ritsen en laat ze opblaasbaar leeglopen.
- Trek het springkussen uit de canvas hoes.
- Omgekeerd proces om de opblaasbare kamer te vervangen en zorg ervoor dat de klep naar buiten wijst.



#### Om de lange kamer (rechthoek) te wijzigen:

- Open beide ritsen volledig en laat ze opblaasbaar leeglopen.
- Duw de opblaasbare kamer langs de bovenkant van de canvasholte.
- Ga naar de andere kant van het Safe Place Bed en trek de opblaasbare kamer erdoorheen
- Omgekeerd proces om de opblaasbare kamer te vervangen en zorg ervoor dat de klep naar buiten wijst.

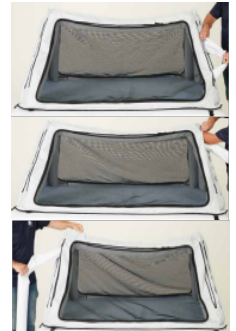

#### Waarschuwingen:

Niet voor kinderen jonger dan 36 maanden vanwege kleine onderdelen en verstikkingsgevaar.

Geen roken of warmtebronnen in de buurt van producten.

Blijf uit de buurt van water, niet van een drijfmiddel.

Geen speelgoed.

Als een kant van het bed leegloopt, stop dan met het gebruik van het bed.

Houd scherpe voorwerpen uit de buurt van het product, lekke banden vallen niet onder de garantie en kunnen letsel bij het kind veroorzaken.

Stevig bevestigen aan stationair bed wanneer in gebruik, niet onafhankelijk getest.

Het Safe Place Bed is 105 cm breed en 190 cm lang en moet worden gebruikt op een stilstaand bed van minimaal 135 cm breed en 190 cm lang.

De ritssluiting moet voor gebruik worden vastgedraaid en vervolgens 's nachts worden gecontroleerd om beknelling te voorkomen.

Houd de gebruiker nauwlettend in de gaten wanneer de gebruiker of anderen toegang hebben tot de buitenkant van het Safe Place Bed, risico's kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, wurging door riemen, verstikking in de ritssluiting en beknelling.

